

Тест-смужки Неоген® Віроксид Супер

Тест-смужки для визначення концентрації робочих розчинів Неоген Віроксид Супер.

Тест-смужки Неоген Віроксид Супер можна використовувати для перевірки концентрації приготовлених розчинів у ваннах для дезінфекції взуття або для дезінфекції твердих поверхонь. Розчини Неоген Віроксид Супер можуть залишатися активними до 7 днів, але це залежить від умов. Тест-смужки Неоген Віроксид Супер є зручним засобом, щоб переконатися, що рівень активності розчину під час використання залишається належним.

Ознайомтеся з брошурою Неоген Віроксид Супер, щоб отримати повний перелік рекомендованих концентрацій і переліку мікроорганізмів, проти яких Неоген Віроксид Супер виявив доведену ефективність.


Корисна інформація про продукт

- Постачаються в пластиковій, багаторазово закриваній тубі, поміщеній у фольгований пакет. Після відкриття смужки слід зберігати в тубі, щоб зберегти їх ефективність, і використати протягом 3 місяців. Не відкрита туба може зберігатися до 24 місяців від дати виготовлення.
- Рекомендується записати дату першого відкриття туби на етикетці (для цього передбачено спеціальне місце).
- Кожна туба містить 50 тест-смужок. Зберігати й перевозити їх слід в оригінальній тубі за температури 5–40 °C та за вологості не вище 80%. Не піддавати смужки прямій дії сонячного проміння чи впливу хімічних речовин.
- На смужках є дві зони реакції (кольорові зони), яких не слід торкатися; тримайте смужку лише за пластикову частину з протилежного боку від цих зон.
- Смужки не виділяють токсичних речовин у навколишнє середовище й не чинять шкідливого впливу на організм людини при прямому контакті. При роботі з тест-смужками не потрібні спеціальні заходи безпеки чи захисту довкілля.
- Використані смужки можна утилізувати як побутові відходи, що не належать до небезпечних.



Як використувувати

Рекомендується відбирати пробу розчину Неоген Віроксид Супер у чисту склянку або стакан для тестування (уникайте занурення тест-смужок безпосередньо у відро чи ванну для дезінфекції взуття).

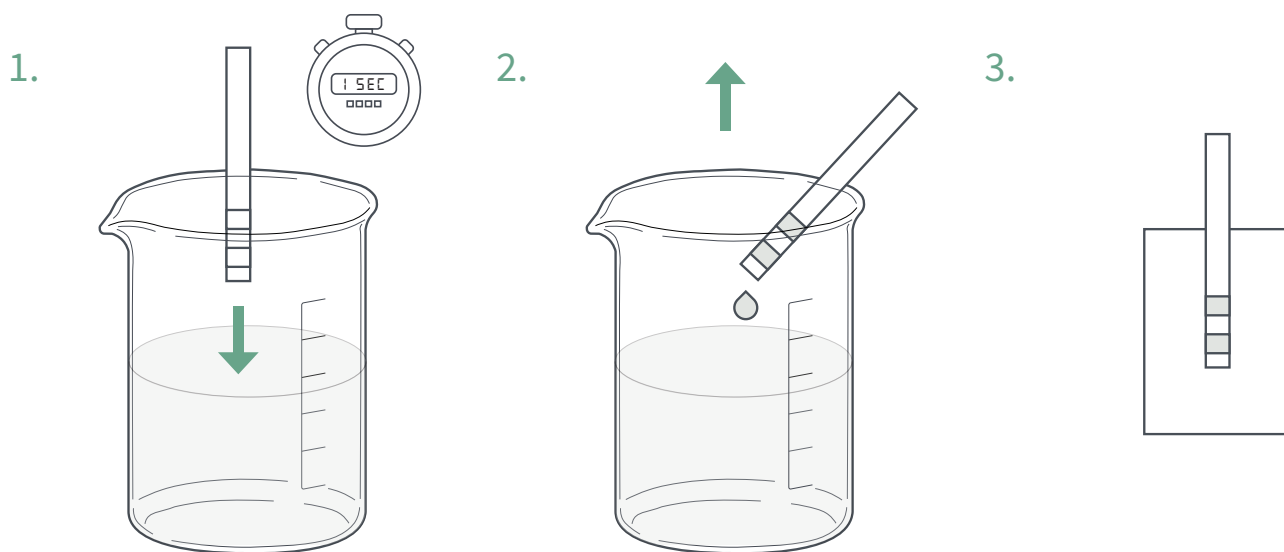

Відберіть 50–100 мл добре перемішаного розчину кімнатної температури (уникайте утворення піни). Занурте тест-смужку у розчин на 1 секунду, переконавшись, що зона реакції повністю занурена в дезінфекційний розчин.

Витягніть смужку з розчину й усунути надлишок рідини, провівши краєм тест-смужки по внутрішній поверхні склянки.

Покладіть тест-смужку на білу поверхню (наприклад, фільтрувальний папір). Після 10 секунд порівняйте колір реакційної зони з кольоровою шкалою на тубі. Не кладіть смужку безпосередньо на тубу, оскільки це може спричинити знебарвлення чи пошкодити референтну кольорову шкалу.

Кольорова шкала



Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися більше подробиць або замовити продукцію.

invet ^{UA}

www.invet.ua
+38 (067) 374-44-40

NEOGEN[®]
NEOGEN.com